



Effizient, vielseitig, ergonomisch

Epredia Histostar Ausgießstation



Epredia HistoStar

Ausgießstation für die Einbettung

Kühl, komfortabel und kontrolliert



- Literaturablage zum Ablegen von Dokumenten
- Die modulare Kühlplatte mit einer Kapazität von 72 Blöcken kann für einen optimalen Arbeitsablauf entweder links oder rechts vom Einbettungszentrum positioniert werden und ist mit einer antimikrobiellen Beschichtung versehen
- Der große 5-Liter-Paraffintank ist mit einem Filtersystem ausgestattet, das das Eindringen von Fremdkörpern in die Ausgabeldüse verhindert
- Praktische Schublade für leicht zugängliche Aufbewahrung

Auf Effizienz getrimmt


- Großes Fassungsvermögen von 5 Litern Paraffin, eine Kühlplatte mit einer Kapazität von 72 Blöcken und Platz für 300 Kassetten.
- Die Epredia™ HistoStar™ Ausgießstation ist so konzipiert, dass der Wartungsaufwand minimiert und eine zuverlässige Leistung über Jahre hinweg gewährleistet wird.

Flexibilität zur Anpassung an Ihren Arbeitsablauf

- Mit dem einstellbaren Paraffinspender der HistoStar-Ausgießstation kann der Benutzer den Spender leicht in die ergonomischste Position bringen.
- Eine Vielzahl von Düsenlängen für Ihren Arbeitsablauf, einschließlich für Supra Mega-Kassetten.
- Der integrierte Epredia™ ParaTrimmer™ bietet platzsparenden Komfort.
- Erhaltung eines sauberen Arbeitsbereichs mit einem effizienten Ableiten von Wachsresten.

Kühler Komfort

- Das glatte, konturierte Design verhindert unangenehme Druckstellen und ist isoliert, um ganztägiges angenehmes Arbeiten trotz kühler Umgebung zu gewährleisten.
- Die Beleuchtungsintensität ist mit fünf LE-Beleuchtungsstufen für den Proben- und Zubehörbereich leicht einstellbar und sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs, wodurch Ermüdungserscheinungen verringert und Fehler minimiert werden.

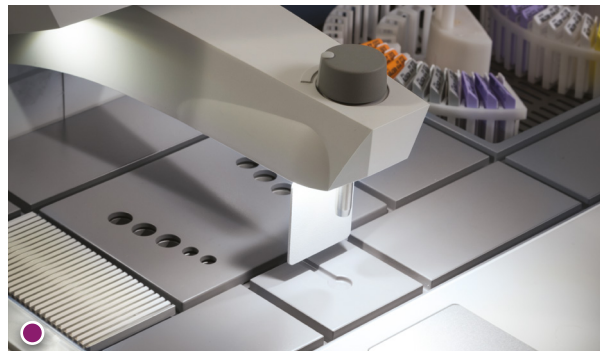

- Vom Benutzer einstellbare Kühlplattentemperatur, um das Auftreten von Blockrissen zu reduzieren
- Großes Fassungsvermögen für 300 Standard-Ausgießformen, 300 Kassetten und 6 Epredia Revos™- oder 4 Excelsior™-Körbe
- Die LED-Beleuchtung mit fünf Helligkeitsstufen bietet eine optimale Ausleuchtung sowohl der Probe als auch des Zubehörbereichs
- Der Zubehörbereich bietet zehn Werkzeugpositionen in fünf verschiedenen Lochgrößen
- ParaTrimmer-Design, optimiert für maximale Produktivität
- Intuitives, mehrsprachiges Touchscreen-Steuerungssystem

Spezifikationen der Epredia HistoStar Ausgießstation

Abmessungen	Ausgießmodul (B, T, H)	650 x 645 x 435 mm
	Kühlplatte (B, T, H)	430 x 645 x 380 mmx
Gewicht	Ausgießmodul	25 kg
	Kühlplatte	20 kg
Betriebsgeräuschpegel		>65 dB
Kapazität Wachsbehälter		5 Liter
Temperaturen	Wachs-Behälter	50 - 70 °C
	Kältepunkt	5 °C
	Wärmepunkt	50 - 70 °C
	Gewebelagerbereich	50 - 70 °C
	Lagerung Ausgießformen	50 - 70 °C
	Kühlplatte	Einstellbar, -12 bis -3 °C mit einer Toleranz von ± 1 °C



Epredia HistoStar Ausgießstation für die Einbettung

Informationen zur Bestellung

Beschreibung	Bestellnummer
HistoStar-Ausgießstation mit Kühlplatte	A81000001
HistoStar Kühlmodul	A81000004
HistoStar Ausgießmodul	A81000007
Andrückhilfe, 2 Stück: 1 x 20 mm and 1 x 12 mm	A81010030
Spachtel Set, Satz mit zwei Spateln	A81010031
Abdeckung für Kassettendeckel	A81010026
Lupeneinheit	A81010032
Fußschalter	AP16629
Elektrische, beheizte Pinzette, rot, 1 mm Spitze	A81010033
Dokumentenhalter-K it	A81010036

Eine effiziente Einbettung erfordert ein hervorragendes Paraffin

Lieferung, Zuverlässigkeit, unübertroffener technischer Support und überragende Produktqualität sind Teil dessen, was Sie mit jedem Karton Epredia™ Histoplast™ Paraffin erhalten. Diese drei aus Paraffin und Kunststoffpolymeren hergestellten Paraffine lassen sich hervorragend verarbeiten und ergeben dünne, flache, faltenfreie Schnitte. Wenden Sie sich an Ihren Epredia-Medizinprodukteberater vor Ort, um einen direkten Vergleich zu erhalten.

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Histoplast PE	8 x 1 kg Beutel	8330
Histoplast IM	8 x 1 kg Beutel	8331
Histoplast LP	8 x 1 kg Beutel	8332



Weitere Informationen finden Sie unter
epredia.com

4481 Campus Drive | Kalamazoo, MI 49008 | Vereinigte Staaten | +1 (800) 522-7270

2026 Epredia. Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken sind Eigentum von Epredia, sofern nicht anders angegeben. **M42005-DE R022026**

epredia
A Member of PHC Group