




Epredia STP 120 Gewebeentwässerer

Das STP 120 ist ein beständiges, kosteneffizientes und innovatives System für die Gewebeverarbeitung, das Ihrem Labor hervorragende Ergebnisse ermöglicht.

Der STP120 Gewebeentwässerer von Epredia gewährleistet Beständigkeit, fördert die Intaktheit des Gewebes und die Sicherheit des Endanwenders während des gesamten Arbeitsablaufs.

Das LCD-Display bietet umfassende Informationen, einschließlich Restzeit, Programmdauer, Paraffintemperatur, Datum und Uhrzeit.

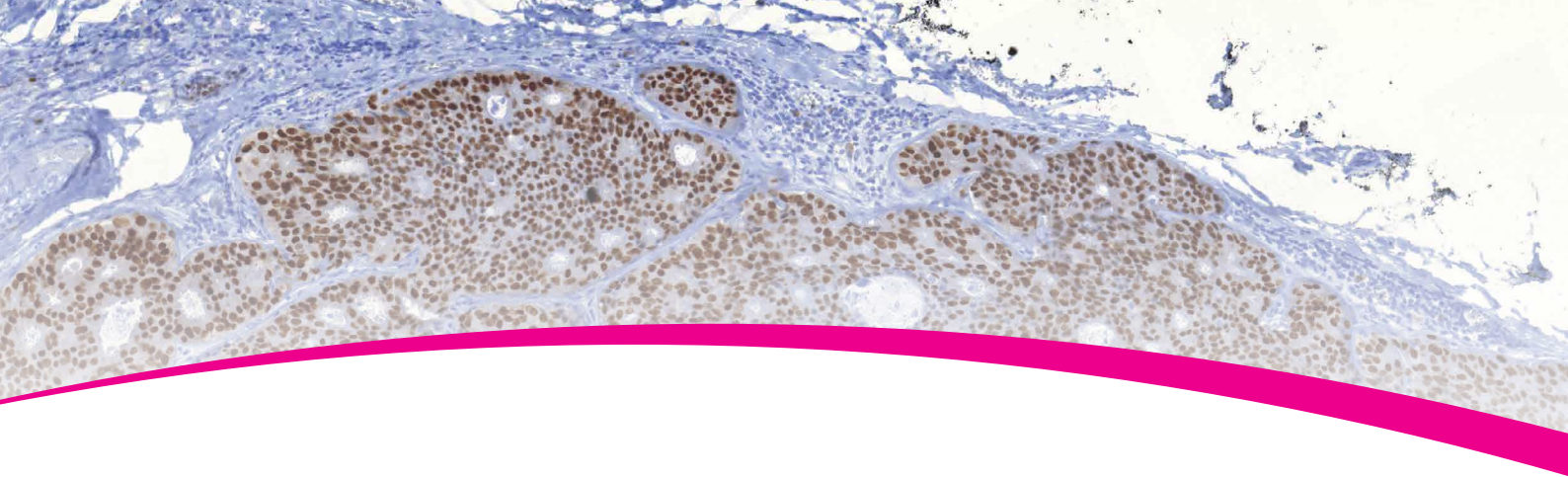

Innovatives Design

Durch die vollautomatische Konstruktion wechselt der Korb alle 60 Sekunden automatisch die Richtung der Bewegung, was eine homogene Mischung, Minimierung von Kreuzkontaminationen und Einsparung von Reagenzienkosten bewirkt.

Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit

- Speichern Sie bis zu zehn verschiedene Programme
- Sofortiger oder verzögerter Startmodus
- Ergonomisches Design ermöglicht volle Zugänglichkeit der Reagenzien
- Absaugsystem für Reagenziendämpfe

Ausfallsicherer Betrieb

Verbessertes Batterie-Backup-System, bei Stromausfall werden die Proben automatisch in den Behälter abgesenkt und das Programm wird fortgesetzt, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.



Produktbeschreibung

Kat. Nr.

STP 120-3 Gewebeentwässerer mit Abluftabsaugung, eingebautem zweiten Kassettenkorb und zusätzlicher Paraffinstation

813160

Spezifikationen

Durchmesser: 85 cm

Höhe: 50-70 cm

Gewicht: 70 kg

Modell

Korbkapazität

813460

240 Kassetten

Weitere Informationen finden Sie unter
epredia.com

4481 Campus Drive | Kalamazoo, MI 49008 | Vereinigte Staaten | +1 (800) 522-7270

© 2024 Epredia Gruppe. Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken sind Eigentum von Epredia und seinen Tochtergesellschaften, sofern nicht anders angegeben. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter. **M2400149 R052025DE**

epredia
A Member of PHC Group